

Inhalt

Inhalt	1
Betriebshinweise	2
Sicherheitshinweise	3
Konformität.....	5
Datenschutz.....	5
Support	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Reinigung des Geräts	6
Produktübersicht.....	7
Gebrauchsanweisung	8
Download der Mi Home App	13
Spezifikationen.....	16
Problemlösung.....	17

Betriebshinweise

- Lassen Sie das Gerät und das Zubehör nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an.
- Setzen Sie das Gerät und das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Gerät dient nur der Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Magnetfeldern.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nicht mit Chemikalien, um es vor Korrosion zu schützen. Benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beschädigung durch Fehlfunktion, unsachgemäße Benutzung, oder Veränderung des Geräts.
- Öffnen, reparieren und verändern Sie das Gerät nicht, hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima konzipiert. Vermeiden Sie daher den Einsatz bei hohen Temperaturen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Bedienung oder Verwendung durch erwachsene Personen vorgesehen. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden schränken Sie den Zugriff durch Kinder bitte mit geeigneten Maßnahmen ein.
- Nur die mitgelieferte Ladestation ist zum Laden des Gerätes geeignet.
- Lagern Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung kühl und trocken. Laden Sie es davor und alle 3 Monate vollständig auf.



Entsorgung

Entsorgen Sie ein defektes Gerät nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.


Sicherheitshinweise

- Transport
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es transportieren.
- Stromkabel
- Das Stromkabel darf nicht zu stark gequetscht, gebogen oder gedreht werden, da es sonst brechen könnte.
 - Ziehen Sie nicht am Stromkabel, wenn Sie die Ladestation von der Stromversorgung trennen.
 - Verwenden Sie nur unterstützte Steckdosen. Folgen Sie diesen Anweisungen bei der Verwendung von Stromkabel und Steckdose, um ein Feuer, einen Stromschlag oder andere Schäden zu verhindern:
 - Das Stromkabel darf nur mit unterstützten Steckdosen verbunden reinigen.
 - Es wird dringend empfohlen, nur das mitgelieferte Stromkabel zu verwenden.
 - Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
 - Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel nicht für andere Produkte.
- Verwendung
- Stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein, wenn das Gerät ungewöhnliche Töne, schlechte Gerüche oder zu viel Wärme abgibt.
 - Führen Sie keine Finger oder Objekte in die Öffnungen ein.
 - Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
 - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Ladestation vom Strom bevor Sie es reinigen.



Hinweis

Sie können bei der ersten Anwendung jucken oder leichte Blutungen bekommen.

Dies liegt daran, dass das Zahnfleisch nicht an diese effiziente Reinigung gewöhnt ist. Es wird empfohlen, den  Favoritenmodus der Zahnbürste zu verwenden. Diese Symptome verschwinden in der Regel innerhalb von 1-2 Wochen. Wenn sie nach 2 Wochen immer noch andauern, hören Sie auf, die Zahnbürste zu benutzen und konsultieren Sie einen Zahnarzt.

Konformität



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich diese elektrische Zahnbürste in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.mihilfe.de/konform>

Datenschutz

Grundsätzlich kann dieses Gerät verwendet werden ohne der Firma Axdia International GmbH Informationen über personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen.

Eine Erfassung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich nach einer Kontaktaufnahme durch Sie per E-Mail, Telefon oder über unsere Internetseite.

In diesen Fällen gilt unsere Datenschutzerklärung, die Sie unter <https://www.mihilfe.de/> einsehen können.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass im Bedarfsfall zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auf Basis unserer Garantiebedingungen Ihre Daten basierend auf unserer oben genannten Datenschutzerklärung erfasst und ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden.



Wichtig!

Dieses Gerät kann, je nach Modell, mit verschiedenen Onlinekonten wie beispielsweise Xiaomi, Facebook oder Twitter verknüpft werden. Für deren Nutzung ist gegebenenfalls die Eingabe von personengezogenen Daten notwendig. In diesen Fällen gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters.

Die Firma Axdia International GmbH kann für die Erhebung und Verwendung dieser Daten weder verantwortlich, noch haftbar gemacht werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Nutzung Ihrer Daten an den Anbieter.

Support

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Importeur

Axdia International GmbH
Formerweg 9
D-47877 Willich (Germany)

WEB: <http://www.mihilfe.de>

E-Mail: support@mihilfe.de

Hotline: +49 (0)2154 / 8826-111

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zur Reinigung des Bodens im Innenbereich und zur Darstellung bestimmter Informationen in Zusammenhang mit Ihrem gekoppelten Mobiltelefon und Nutzung der „Mi Home App“ konzipiert. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Geräts.



Hinweis


Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Benutzung. Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Gerät.

Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Produktübersicht

Schutzabdeckung
der Antriebswelle

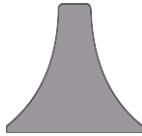

Zahnbürstenkopf
Schutzabdeckung



Zahnbürstengriff

Ein / Aus Taste /
Modi umschalten



Modi:

Standard

Sanft

Favorit

Energie /
Bluetooth-
Anzeige

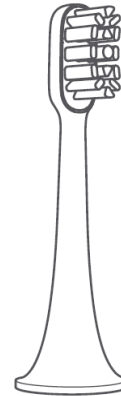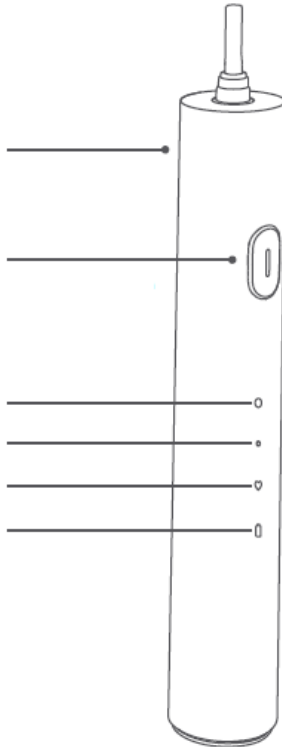


Zahnbürstenkopf

Farbring




Ladestation

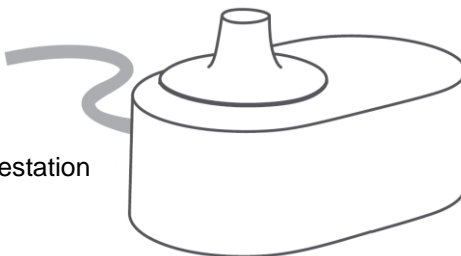

1. Anbringung des Zahnbürstenkopfes

Befestigen Sie den Zahnbürstenkopf am Zahnbürstengriff und achten Sie darauf, dass ein Abstand von 0,4 - 1 mm zwischen den beiden Teilen ist. (Die Lücke soll sicherstellen, dass der Zahnbürstenkopf bei hochfrequenten Vibrationen nicht mit dem Zahnbürstengriff kollidiert, damit der Motor leistungsfähiger arbeiten kann.)

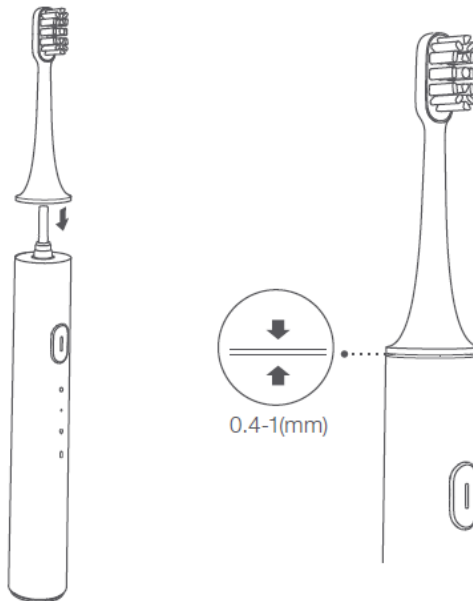


2. Anbringen und ersetzen des Farbrings

- Ersetzen Sie den Farbring mit einer anderen Farbe, nach Wahl.
- Entfernen des Farbrings:
Halten Sie die Zahnbürste verkehrtherum mit einer Hand fest. Drücken Sie mit dem Daumen der eine Hand gegen den genoppten Rücken der Zahnbürste und mit dem Zeigefinger der anderen Hand gegen das Luftloch unten. Stecken Sie anschließend Ihren Daumennagel in die Lücke zwischen


Farbring und Griff und drücken Sie den Farbring mit etwas Kraft nach oben, um ihn zu entfernen.

- Anbringen des Farbrings:
Halten Sie den Farbring mit den Verbindungspunkten so, dass er zu den drei Aussparungen im Griff passt. Drücken Sie den Farbring in Richtung des Griffs, um ihn zu montieren.

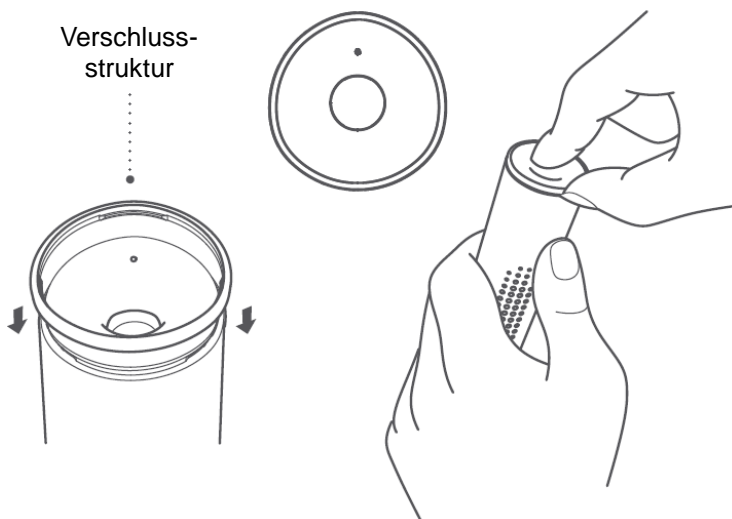

3. Zahnpasta auftragen

Befeuchten Sie den Zahnbürstenkopf und drücken Sie eine angemessene Menge Zahnpasta auf diesen.

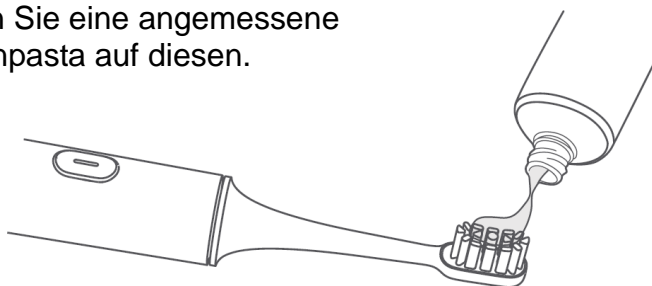



4. Modus auswählen



- Ein / Aus / Modus auswählen
- Einschalten: Drücken Sie die Taste kurz, um das Gerät einzuschalten.
- Modus auswählen: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um den Modus zu wechseln.
- Pause: Drücken Sie die Taste für eine Sekunde, um das Gerät zu pausieren. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn nach 30 Sekunden im pausierten Zustand keine Funktion ausgeführt wird.
- Ausschalten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie in den Favoritenmodus und wechseln Sie anschließend den Modus erneut, um das Gerät auszuschalten.
- Im Falle besonderer Umstände halten Sie die Taste 12 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (um Datenfehler zu vermeiden, synchronisieren Sie vorher die Daten mit Ihrem Smartphone über Bluetooth).


5. Zähne gesund putzen

- Bewegen Sie die Zahnbürste langsam und unter Einhaltung eines Winkels von 45° zwischen den Zahnbürstenborsten und den Zahnfleischreihen.
- Sie können die Ein-/Aus-Taste während des Bürstens drücken, um den Bürstenmodus frei zu wählen.
- Während des Bürstens stoppt die Zahnbürste alle 30 Sekunden kurz die Vibration, um Sie aufzufordern, die Bürstenposition zu ändern.
- Wenn die Zahnbürste nicht aktiv pausiert, schaltet sie sich nach Beendigung des Bürstenmodus automatisch aus (der Bürstenmodus kann in der App eingestellt werden).

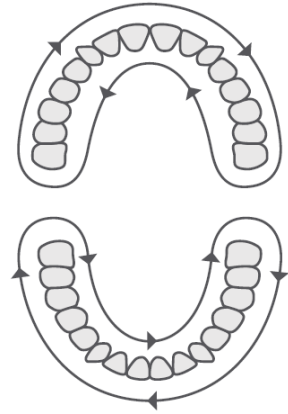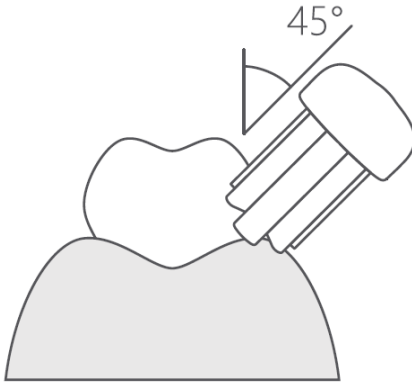

6. Reinigen des Bürstenkopfes

- Nach dem Putzen den Zahnbürstenkopf unter fließendem Wasser abspülen.
- Decken Sie den Zahnbürstenkopf nach der Reinigung mit der Schutzabdeckung ab, um den Zahnbürstenkopf sauber und hygienisch zu halten.

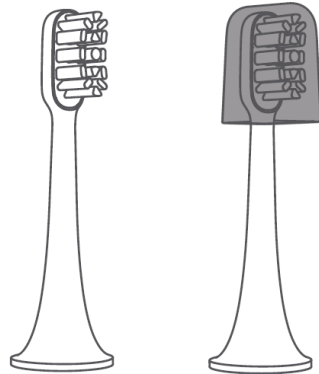


Hinweis

Austausch der Bürstenköpfe alle 3 Monate empfohlen.

7. Laden Sie das Gerät regelmäßig auf

- Sobald die Ladestation mit Strom versorgt ist, zeigt die Zahnbürstenleistungsanzeige verschiedene Status an:

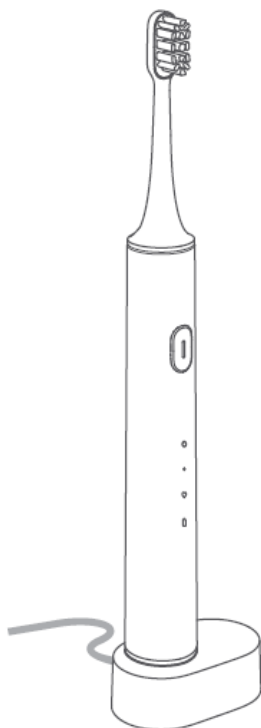

- Bluetooth verbunden: blau
- 100%: konstant blaugrün
- 100%-60%: blinkt blaugrün
- 60%-20%: blinkt orange
- 20%-0%: blinkt rot

- Es dauert mehr als 12 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist, wenn der Akku schwach ist (die Batterieanzeige blinkt rot).
- Wenn die Bluetooth-Verbindung während des Ladevorgangs erfolgreich war, blinkt die Strom-/Bluetooth-Anzeige dreimal und die Bluetooth-Verbindung bleibt bestehen. Nachdem die Bluetooth-Verbindung getrennt wurde, wird der Effekt der Ladeanzeige wiederhergestellt.

1. Schnellinstallation

Steuern Sie Ihr Gerät und interagieren Sie es mit anderen Smart Home Geräten in der Mi Home App.

- i. Laden Sie die Mi Home App herunter und installieren Sie sie. Scannen Sie dafür den QR-Code oder gehen Sie zum App Store, um die Mi Home App herunterzuladen und zu installieren.



- ii. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu indem Sie die Mi Home App öffnen, oben rechts auf "+" tippen und den Anweisungen folgen.

2. Mit der Mi Home App verbinden

- i. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und halten Sie die Zahnbürste in die Nähe Ihres Smartphones.
- ii. Öffnen Sie die Mi Home App, tippen Sie auf "+" oben rechts, um die Geräteauswahlseite aufzurufen.
- iii. Suchen und wählen Sie "Mi Elektrische Zahnbürste" und betreten Sie die Verbindungsseite.
- iv. Halten Sie den Netzschalter drei Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Anzeige blinkt dreimal und wird danach dauerhaft

leuchten, anschließend schaltet sie sich nach erfolgreicher Verbindung aus und das Gerät erscheint auf der Startseite.




Hinweis

Die Zahnbürste funktioniert während der Bluetooth-Verbindung nicht.


Die Verbindung über Bluetooth kann nicht hergestellt werden, wenn die Zahnbürste in Betrieb ist.

3. Datensynchronisation


Laden Sie die Mi Home App herunter, registrieren Sie ein Mi-Konto und melden Sie sich mit diesem Konto an. Rufen Sie "Meine Geräte" auf und tippen Sie auf das Gerät in der Geräteliste.

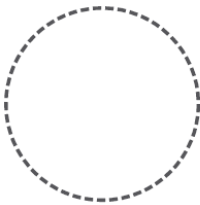

Bewegen Sie die Zahnbürste in die Nähe des Smartphones.

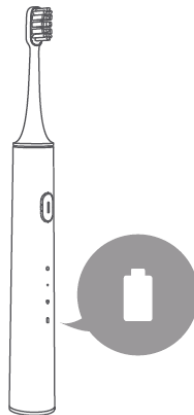


Schieben Sie die Seite nach unten, um die Daten zu synchronisieren.

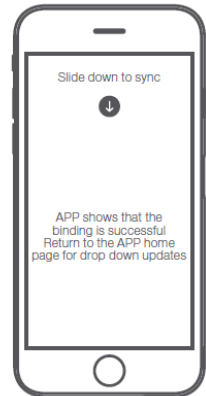

Die Datensynchronisation ist abgeschlossen.

4. **Berichtsübersicht und Funktionseinstellung**

- i. Wechseln Sie in den  Favoritenmodus.
- ii. Es werden Bürstdaten und Analyseberichte angezeigt.
- iii. Sehen Sie sich die verbleibenden Nutzungstage des Zahnbürstenkopfes an.

Spezifikationen

Zahnbürstengriff

Name	Mi Elektrische Zahnbürste
Modell	DDYS01SKS
Nennspannung	3,7V DC 0,55A
Nennleistung	2W
Ladezeit (ca.)	12 Stunden
IP-Schutzklasse	IPX7

Bluetooth 4.0

Frequenzbereich	2402 – 2480 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung	0 dBm

Kabelloses Laden

Frequenzbereich	483,85 kHz
Maximale HF-Ausgangsleistung	0 dBm

Ladestation

Lademodus	Induktives Laden
Typ	Sicher umschlossen
IP-Schutzklasse	IPX7
Nennspannung	5V DC 0,5A

Problemlösung

Fehlermeldung	Lösung
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Das Gerät wird gerade aufgeladen; Das Gerät ist über Bluetooth verbunden; Der Akkustand ist niedrig.
Die Zahnbürste kann nicht auf der Antriebswelle montiert werden.	Das Loch der Zahnbürste weist Fremdkörper auf; Zahnpasta oder andere Substanzen haften an der Antriebswelle; Die Zahnbürste ist kein original Mi Zahnbürstenkopf.
Der Stromverbrauch ist hoch und das Gerät muss häufig aufgeladen werden.	Das Gerät ist über Bluetooth lange Zeit im verbundenen Zustand; das Gerät wird häufig verwendet.
Die Vibration des Zahnbürstenkopfes ist schwach.	Der Zahnbürstenkopf ist nicht richtig montiert; zwischen dem Zahnbürstenkopf und dem Zahnbürstengriff befinden sich Fremdkörper.
Die App kann sich nicht mit der Zahnbürste verbinden.	Bluetooth des Mobilteils ist deaktiviert; Die Zahnbürste ist nicht in der Nähe des Mobilteils; Die Zahnbürste befindet sich in Benutzung.

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hergestellt von: Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company)

Anschrift: Room 2018, Block B, Floor 2, Ruifeng Business Center, No. 22 Guimiao Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Weitere Informationen finden Sie unter www.mi.com.

Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

